

The image features a blue dental handpiece, the MEDIT i600, positioned diagonally on the right side. The handpiece has a white upper section and a blue lower section with a silver checkmark icon. A white cable is attached to the bottom. The background is a stylized blue splash or liquid form. The text 'MEDIT i600' is written in white on the blue splash. In the bottom right corner, there is a logo for 'ND NORMADENT IMPLANT TECHNOLOGY' and the text 'Distribuito da:'.

MEDIT *i600*

Distribuito da:

ND **NORMADENT**
IMPLANT TECHNOLOGY



**L'odontoiatria digitale
nelle tue mani**

Straordinaria esperienza di scansione

Leggero,

Soli 245g di peso, con impugnatura migliorata per la massima comodità.

Fluidò,

La velocità migliorata e le immagini di scansione ottimali offrono un'esperienza di scansione più fluida, indipendentemente dalle specifiche del PC.

Vivido,

Trasmette dati di scansione vividi tramite il nuovo sistema ottico utilizzato nel Medit *i700*.

La mente dell'*i700* con una nota di colore

Incredibilmente accurato, leggero e fluido

Il flusso di lavoro digitale inizia con dati accurati. Medit *i600* acquisisce i dati in modo preciso, per una comoda esperienza di odontoiatria digitale.


*Elevata accuratezza

Accuratezza dell'arcata completa: $10.9 \mu\text{m} \pm 0.98$

*Acquisisce dati di scansione accurati dal segmento anteriore alla superficie occlusale.

Il più semplice. Il più agevole.

Acquisisci il controllo totale della tua scansione con un solo clic. Non c'è bisogno di tanti cavi e hub! Collega e scansiona in modo semplice utilizzando un solo cavo per il collegamento diretto con un PC.

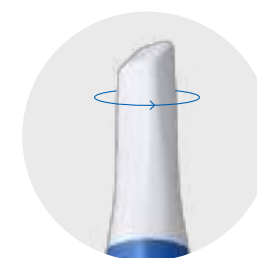

Puntale reversibile a 180°



Pulsante di avvio della scansione



Cavo rimovibile

Facile come fare una passeggiata

Medit *i600* può essere collegato direttamente al PC utilizzando un solo cavo, eliminando le limitazioni dei dispositivi cablati tra le poltrone e gli studi per una più ampia portata del trattamento tramite scanner.



Area di scansione più ampia (rispetto all'*i500*)

Un'area di scansione più ampia (15x13mm) acquisisce più dati in un solo passaggio, per un'esperienza di scansione più comoda.

i600 *i500*

Semplifica la scansione

Sperimenta una straordinaria acquisizione di dati digitalizzati con Medit Scan for Clinics. La nostra tecnologia software all'avanguardia rende la scansione più comoda.



Guida scansione intelligente

La guida utente potenziata fornisce assistenza per eventuali anomalie rilevate in fase di scansione.



Filtro scansione intelligente

Le prestazioni di filtraggio automatico migliorate facilitano il processo di scansione filtrando i tessuti molli come labbra, guance e lingua



Filtro colore intelligente

Filtra automaticamente i colori registrati, come quello dei guanti medicali, durante la scansione.



Cucitura intelligente

Scansiona con la tua personale strategia di scansione. I dati di scansione frammentati vengono allineati con l'area comune rilevata automaticamente.

Pazienti più soddisfatti

Il trattamento con dati accurati contribuisce a migliorare la soddisfazione per il protocollo digitale. Anche la consultazione tramite le immagini 3D e le varie applicazioni di Medit migliora la soddisfazione generale dell'esperienza odontoiatrica.

Aumenta la produttività sulla poltrona

Non dovrai più preoccuparti del costo aggiuntivo derivante dall'utilizzo di programmi e sistemi complessi! L'eterogeneità delle app Medit rende il trattamento più agevole, semplice e comodo!



Per ogni studio

Che tu sia un principiante nel campo dell'odontoiatria digitale o che stia cercando uno scanner aggiuntivo, l'i600 ti renderà un perfetto collaboratore

MEDIT i600

Specifiche

| Categoria | | Medit i600 |
|---------------------|------------------------------|---|
| Scanning Technology | Frame di scansione | Fino a 35 FPS |
| | Tecnologia di imaging | Tecnologia video 3D in motion Acquisizione streaming 3D full color |
| | Sorgente LED | LED |
| | Tecnologia anti-appannamento | Anti-appannamento adattativo |
| Accuratezza | Arcata completa | 10.9µm ± 0.98 |
| Manipolo | Dimensioni | 248 x 44 x 47.4 mm |
| | Peso totale | 245 g |
| Puntale | Dimensioni del puntale | 22.2 x 15.9 mm |
| | Area di scansione | 15 x 13 mm |
| | Autoclavabile | Autoclave 100 volte 121°C 30 mins 134°C 4 mins (tipologia pre-vuoto) 135°C 10 mins (tipologia gravità) |
| | Puntale reversibile | Sì |
| Modalità speciale | Modalità controllo remoto | No |
| | Disinfezione UV-C | No |
| Connettività | | USB 3.1 Gen1 |

- Le prestazioni possono variare a seconda delle specifiche del PC
- Test di accuratezza dello scanner i600 a cura del dipartimento R&D Medit
- Puntale per 150 cicli in autoclave venduto separatamente



Scansionare il codice QR per i requisiti di sistema aggiornati. >>

Chi siamo

Medit è specializzata in misurazioni 3D e soluzioni CAD/CAM per studi e laboratori dentistici, inclusi scanner intraorali, basate sulla propria tecnologia brevettata e all'avanguardia. Sviluppiamo anche soluzioni di piattaforma per l'odontoiatria digitale, supportando flussi di lavoro collaborativi. In aggiunta, la linea Solutionix fornisce scanner 3D e software al mercato industriale. Il nostro obiettivo è mettere a disposizione una tecnologia innovativa e prodotti di massima qualità per garantire una crescita comune a tutti i partner.

La nostra community Medit

Feedback continui, suggerimenti relativi a nuovi flussi di lavoro terapeutici e discussioni attive. Dai dibattiti accesi alle chiacchierate leggere, la community di Medit è sempre vivace grazie ai nostri appassionati clienti.

Colleghi di tutto il mondo si supportano attivamente, si aiutano a vicenda e sono lieti di dare il benvenuto ai nuovi colleghi nel mondo dell'odontoiatria digitale.

Scansiona il codice QR per partecipare!

Medit e la sua community di colleghi ti supportano e ti augurano un buon viaggio nel mondo dell'odontoiatria digitale.



Gruppo di utenti



Medit Academy



Centro assistenza

Distribuito da:



Via Francesco Ferrucci, 18,
20811 Cesano Maderno MB
Tel: 0362 55 14 11
commerciale@normadent.com

www.normadent.com

